


big ben®

Riester

The familiar way

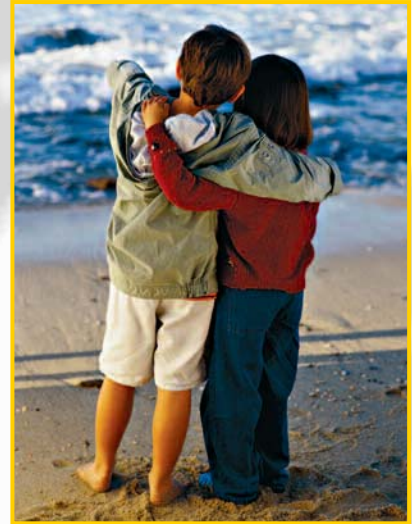

**Máxima precisión,
para toda la vida.**



Tensiómetros aneroides


big ben®

big ben® round y square: aparatos bien pensados para el uso cotidiano.

Auténtica calidad Riester: tensiómetros de reloj con excelentes prestaciones que llaman la atención por su interesante relación calidad-precio. Los big ben® son especialmente grandes y sólidos, y resisten sin problemas el día a día de consultorios y clínicas. Tanto en los modelos de sobremesa, de pared, de pie o para anestesia, redondos o cuadrados, el diseño atractivo con elegantes colores mates crea una atmósfera agradable para médicos y pacientes en cualquier entorno. Todos los aparatos están disponibles sin látex (en ese caso, indíquese LF en la referencia). Además, Riester ofrece una amplia selección de tamaños de brazalete.

- Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o □145,5 mm) y excelente contraste para una lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg
- Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes
- Pera de látex para inflar el brazalete
- Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina
- Microfiltro para proteger la válvula de purga y el sistema de medición
- Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm Hg
- Mecanismo de precisión montado sobre un

- puente especial para garantizar una estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero
- Sin fijación del punto cero
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg

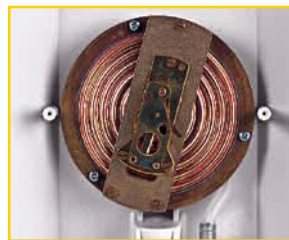

La fijación del mecanismo de precisión sobre un puente metálico sólido y la membrana de presión extragrande garantizan la posición de cero de la aguja de modo seguro.

big ben®

Modelos de sobremesa

Los **modelos de sobremesa** big ben® son una ayuda fiable y flexible en la ajetreada actividad diaria del consultorio. Con **base de gran estabilidad**. También disponibles **sin látex** (en ese caso, indíquese LF en la referencia).



Unión atornillada del tubo cromada, para cambiar rápidamente los brazaletes.



Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



Pera de látex con válvula de purga de precisión.

modelos big ben® de sobremesa

brazalete arrollable, adultos
 brazalete con gancho, adultos
 brazalete de velcro, adultos
 brazalete de velcro, brazos gruesos
 brazalete de velcro, niños
 sólo manómetro, con base de sobremesa, sin accesorios

Ø 147,2 mm, 2 tubos

No.1451
 No.1452
 No.1453
 No.1453-123
 No.1453-130
 No.1453-100


□145,5 mm, 2 tubos

No.1454
 No.1455
 No.1456
 No.1456-123
 No.1456-130
 No.1456-100

big ben®

Modelos de pared

Los **modelos de pared** big ben® resisten el ajetreo diario de la clínica. Con **soporte para pared extremadamente resistente, de plástico reforzado con fibra de vidrio, y carcasa extraordinariamente robusta de plástico ABS**. Ángulo de giro total 130 grados (65 grados a la izquierda y a la derecha respectivamente). Tornillos y tacos de fijación incluidos. Conversión sencilla en modelo big ben® para anestesia mediante la abrazadera universal. También disponibles sin látex (en ese caso, indíquese LF en la referencia).

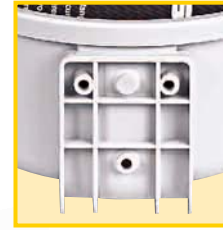

Soporte para pared de plástico ABS reforzado con fibra de vidrio: sólido como el acero.

modelos big ben® de pared

brazalete arrollable, adultos
brazalete con gancho, adultos
brazalete de velcro, adultos
brazalete de velcro, brazos gruesos
brazalete de velcro, niños

sólo manómetro, con soporte para pared, sin accesorios

Para transformar en modelo para anestesia:

abrazadera universal para fijación a una barra
oporte mural de 2 agujeros, incl. 2 tornillos

Ø 147,2 mm, 2 tubos

No.1457

No.1458

No.1459

No.1459-123

No.1459-130

No.1459-100

□ 145,5 mm, 2 tubos

No.1463

No.1464

No.1465

No.1465-123

No.1465-130

No.1465-100

No.10384

No.54665

big ben®

Modelos para anestesia

Los modelos big ben® **para anestesia** son instrumentos fiables y flexibles. Con ayuda de la abrazadera universal, **se instalan de forma rápida y estable** en todos los modelos de barra habituales en el ámbito médico. Ángulo de giro total 130 grados (65 grados a la izquierda y a la derecha respectivamente). **Conversión sencilla en modelo de pared** con ayuda del soporte para pared. También disponibles sin látex (en ese caso, indíquese LF en la referencia).



Fijación rápida a cualquier barra de tipo habitual mediante la abrazadera universal.

modelos big ben® para anestesia

brazalete arrollable, adultos
brazalete con gancho, adultos
brazalete de velcro, adultos
brazalete de velcro, brazos gruesos
brazalete de velcro, niños

sólo manómetro, con fijación para barra, sin accesorios
abrazadera universal para fijación a una barra

Para transformar en modelo de pared:

soporte para pared de 3 agujeros, incl. 3 tornillos

Ø 147,2 mm, 2 tubos

No.1486

No.1487

No.1488

No.1488-123

No.1488-130

No.1488-100

□ 145,5 mm, 2 tubos

No.1493

No.1494

No.1498

No.1498-123

No.1498-130

No.1498-100

No.10384

No.54663


big ben®

Modelos de pie

Los **modelos de pie** big ben® mantienen el equilibrio en cualquier situación. Disponibles con pie de Ø 38 cm con revestimiento pulverizado (inoxidable) o pie de Ø 55 cm de **acero inoxidable especialmente resistente**. En el pie de Ø 55 cm, dos de las ruedas son bloqueables. Altura regulable de 0,86 m a 1,12 m. También disponibles **sin látex** (en ese caso, indíquese LF en la referencia).

Riester

The familiar way

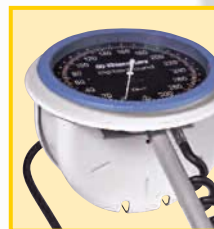

Cestillo para brazaletes de material ABS de alta resistencia.



Aguja muy visible y escala de gran claridad.

modelos big ben® de pie

tamaño del pie

brazaletes arrollable, adultos

brazaletes con gancho, adultos

brazaletes de velcro, adultos

brazaletes de velcro, brazos gruesos

brazaletes de velcro, niños

sólo manómetro, sin pie, brazaletes de velcro, adultos

Ø 147,2 mm, 2 tubos

Ø 38

Ø 55

No.1466

No.1473

No.1467

No.1474

No.1468

No.1475

No.1468-123 No.1475-123

No.1468-130 No.1475-130

□ 145,5 mm, 2 tubos

Ø 38

Ø 55

No.1476

No.1483

No.1477

No.1484

No.1478

No.1485

No.1478-123 No.1485-123

No.1478-130 No.1485-130

No.1468-500

No.1478-500

Rudolf Riester GmbH

P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen

Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0

Fax: +49 (0)74 77/92 70-70

info@riester.de

www.riester.de